

S-Pak™ Membranes

Простой в использовании мембранный фильтр.


Для обеспечения максимальной производительности и эффективности каждая индивидуально упакованная мембрана S-Pak™ защищена синим листом бумаги, который предотвращает контакт мембраны с пленкой. Этот защитный лист предотвращает миграцию клея.

Преимущества мембраны S-Pak™

- Индивидуально упаковано
- Стерильный
- Готов к использованию
- Легко использовать
- Нет гидрофобных пятен
- Нет токсичности
- Лучшее восстановление



Легко использовать и манипулировать руками в перчатках

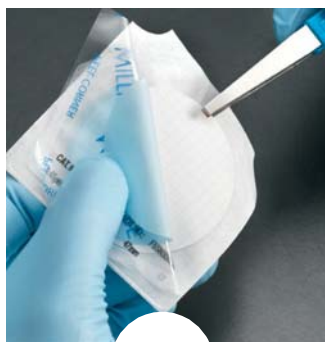

Используя стерильные щипцы, отогните пленку и отделите синюю бумагу от мембраны. Достаньте мембрану с помощью щипцов

or



Поместите мембрану и синюю бумагу на подставку для влажной фильтрации. Во влажном состоянии синяя бумага скручивается, и ее можно легко удалить щипцами.

Информация для заказа

Мембранные фильтры S-Pak™: 600 (4 коробки по 150 мембран)

Размер пор (мкм)	Диаметр фильтра	Цвет фильтра	Каталог
0,22	47	белый	GSWG047S6
0,45	47	черный	HABG047S6
0,45	47	белый	HAWG047S6
0,45 (PVDF)	47	белый	HVWP047S6
0,7	47	белый	HCWG047S6
0,8	47	черный	AABG047S6
0,8	47	белый	AAWG047S6
1,2	47	белый	RAWG047S6
0,45	50	белый	HAWG050S6
0,45	50	черный	HABG050S6
0,45	50	зеленый	HAGG050S6
1,2	50	белый	RAWG050S6

Merck Millipore предлагает широкий выбор мембран, отвечающих вашим конкретным требованиям к фильтрации. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем для получения дополнительной информации. Для ваших больших объемов работ попробуйте нашу систему EZ-Pak®!

Мы предоставляем информацию и консультации нашим клиентам по технологиям применения и нормативным вопросам в меру наших знаний и возможностей, но без каких-либо обязательств или ответственности. Наши клиенты должны во всех случаях соблюдать существующие законы и правила. Это также относится к любым правам третьих лиц. Наша информация и советы не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности нашей продукции для предусмотренной цели.

С-Пакты, яркие М, Millipore и Sigma-Aldrich являются товарными знаками компании Merck KGaA, Дармштадт, Германия или ее дочерних компаний. Подробная информация о товарных знаках доступна на общедоступных ресурсах.

© 2018 Merck KGaA, Дармштадт, Германия и/или ее дочерние компании. Все права защищены.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the US and Canada.

